



Tabeeb Vascular
طبيب درمان پژوهش قلب (سهامي خاص)





طبيب؛ تمرکز تخصصی بر تجهیزات مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

شرکت دانش بنیان طبيب درمان پژوهش قلب تولیدکننده تجهیزات مصرفی تخصصی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است. آنچه طبيب را شکل داده، تنها مجموعه‌ای از محصولات نیست؛ بلکه دانشی است که طی سال‌ها در طراحی محصول، مهندسی فرایند، تولید و کنترل کیفیت ایجاد شده و به زیرساخت‌ها، تجهیزات و تجربه تولید تبدیل شده است.

طبيب در یک نگاه



نیروی انسانی
بیش از ۱۰۰ نفر



دانش بنیان
از سال ۱۴۰۱



تأسیس
۱۳۹۷



سبد فعلی
۱۳ محصول تخصصی



فضای تمیز
۱۶۰۰ مترمربع

رویکرد طبيب



دانش عمیق و توان
ساخت دستگاه‌های تولید



توجه ویژه به نظر
متخصصان



توسعه مرحله به مرحله
فناوری، محصول و خطوط تولید



پایش کیفیت از مواد
اولیه تا محصول نهایی



توانمندی‌های طبیب

از توسعه فناوری تا تولید و کنترل کیفیت

در طبیب، توسعه محصول با شناخت عملکرد مورد انتظار در محیط بالینی آغاز می‌شود و مراحل طراحی مهندسی، انتخاب مواد، ساخت نمونه، توسعه فرآیند تولید و آزمون را طی می‌کند. واحد تحقیق و توسعه طبیب بر توسعه محصولات جدید و بهبود مستمر محصولات موجود متمرکز است. این مسیر با اتکا به دانش فنی، تجربه تولید و تعامل مستمر با متخصصین محترم و مراکز درمانی دنبال می‌شود. علاوه بر محصول، دستگاه تولید آن محصول هم در طبیب ساخته می‌شود! در طبیب، کیفیت با استقرار و پایش فرایندها تضمین و با بهره‌گیری از دانش و تجهیزات بعضاً منحصر به فرد، کنترل می‌شود.

تحقیق و توسعه

طراحی محصولات جدید و بهبود مستمر محصولات موجود



تولید

توسعه فناوری، فرایند و تجهیزات تخصصی تولید محصولات اینترنشن



کیفیت

به کارگیری فرایندها برای تضمین فعالیت کیفیت‌محور در کنار توانمندی منحصر به فرد در QC



بالینی

بهره‌گیری مستمر از نظرات متخصصان از طراحی تا پس از مصرف



محصولات طبیب

محصولات مصرفی تخصصی
حوزه آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قلب



کتترها

کتتر آنژیوگرافی رادیال | کتتر آنژیوگرافی فمورال | کتتر راهنما

شیت‌ها

شیت رادیال | شیت فمورال

گایدوایرها

گایدوایر گاید PTFE | گایدوایر هیدروفیلک | گایدوایر PTCA

شریان بندها

شریان بند دو بالونه | شریان بند رادیال مدل دیبا

سایر محصولات

اینفلتور | سوزن آنژیوگرافی | وای کانکتور

کنتر آنژیوگرافی رادیال

Radial Angiographic Catheter

کنتر آنژیوگرافی رادیال طیب برای انجام آنژیوگرافی عروق کرونری از مسیر شریان رادیال استفاده می‌شود. ساختار شفت با هدف ایجاد تعادل میان انعطاف پذیری، کنترل پذیری، پایداری و انتقال گشتاور ۱ به ۱ در هنگام استفاده، طراحی شده است. ترکیب انتخاب مواد، هندسه سیم و خواص مکانیکی آن در کنار توجه دقیق به کیفیت تولید، منتج به محصولی متمایز می‌شود..

کاربرد

برای قرارگیری در ورودی عروق کرونر، انتقال ماده حاجب و انجام تصویربرداری تشخیصی از مسیر رادیال

مشخصات اصلی

مدل	TIG 3.5 / TIG 4.0
سایز	5F و 6F
طول	۱۰۰ سانتی‌متر

ویژگی‌های کلیدی

- ◆ شفت چندلایه با دیواره نازک، سطح صاف و مقاومت مناسب در برابر تاخوردگی
- ◆ تقویت شده با بافت فلزی برای انتقال بهتر گشتاور، هدایت پذیری و پایداری بیشتر
- ◆ قابلیت مشاهده مناسب نوک و بدنه کنتر هنگام تصویربرداری
- ◆ حفظ مناسب فرم نوک کنتر در حین استفاده
- ◆ هاب پلی کربنات بال‌دار با طراحی مناسب برای کنترل و اتصال مطمئن
- ◆ تقویت محل اتصال شفت و هاب برای افزایش پایداری هنگام کار
- ◆ نوک انتهایی نرم برای کاهش احتمال آسیب به دیواره عروق
- ◆ امکان تولید محصول با مشخصات و پیکربندی‌های متناسب با نیازهای بالینی
- ◆ شکل انتهایی متناسب با رگ هدف، با حافظه شکلی مطلوب در دمای بدن
- ◆ طراحی تکیه‌گاه مناسب برای حفظ پایداری کنتر هنگام تزریق ماده حاجب

کنتر آنژیوگرافی فمورال

Femoral Angiographic Catheter

کنتر آنژیوگرافی فمورال طبیب برای انجام آنژیوگرافی عروق کرونری از مسیر شریان فمور استفاده می شود. ساختار شفت با هدف ایجاد تعادل میان انعطاف پذیری، کنترل پذیری، پایداری و انتقال گشتاور ۱ به ۱ در حین هدایت، طراحی شده است. ترکیب انتخاب مواد، هندسه سیم و خواص مکانیکی آن در کنار توجه دقیق به کیفیت تولید، منتج به محصولی متمایز می شود..

کاربرد

برای عبور از مسیر عروقی، قرارگیری در موقعیت مناسب، تزریق ماده حاجب و مشاهده ساختار عروق

مشخصات اصلی

متنوع	مدل
5F و 6F	سایز
۱۰۰ سانتی متر	طول

ویژگی‌های کلیدی

- ◆ شفت چندلایه با دیواره نازک، سطح صاف و مقاومت مناسب در برابر تاخوردگی
- ◆ تقویت شده با بافت فلزی برای انتقال بهتر گشتاور، هدایت پذیری، پیشروی و پایداری بیشتر
- ◆ قابلیت مشاهده مناسب نوک و بدنه کنتر هنگام تصویربرداری
- ◆ حفظ مناسب فرم نوک کنتر در حین استفاده و پس از مانور
- ◆ هاب پلی‌کربنات بال‌دار با طراحی مناسب برای کنترل و اتصال مطمئن
- ◆ تقویت محل اتصال شفت و هاب برای افزایش دوام و پایداری هنگام کار
- ◆ نوک انتهایی نرم برای کاهش احتمال آسیب به دیواره عروق
- ◆ امکان ارائه در شکل‌ها و مشخصات متناسب با نیازهای مختلف بالینی
- ◆ شکل انتهایی متناسب با رگ هدف، با حافظه شکلی مطلوب در دمای بدن
- ◆ طراحی تکیه‌گاه مناسب برای حفظ پایداری کنتر هنگام تزریق ماده حاجب

کتر راهنما

Guiding Catheter

کتر راهنمای طبیب برای انجام مداخله درمانی پس از تشخیص گرفتگی عروق قلبی به کار می‌رود.

کاربرد

کتر راهنما مسیری مطمئن برای عبور تجهیزات آنژیوپلاستی و درمان گرفتگی عروق با کمک بالن PTCA یا استنت فراهم می‌کند.

مشخصات اصلی

مدل	متنوع
سایز	5F و 6F
طول	۱۰۰ سانتی‌متر

ویژگی‌های کلیدی

- ♦ شفت با استحکام بالا، دیواره نازک، سطح صاف و مقاومت مناسب در برابر تاخوردگی
- ♦ تقویت شده با بافت فلزی برای انتقال بهتر گشتاور، هدایت پذیری، پیشروی و پایداری بیشتر
- ♦ قابلیت مشاهده مناسب نوک و بدنه کتر هنگام تصویربرداری
- ♦ حفظ مناسب فرم نوک کتر در حین استفاده و پس از مانور
- ♦ پشتیبانی مناسب از گایدوایر در عروق باریک، زاویه‌دار یا پیچ‌خورده
- ♦ هاب پلی‌کربنات بال‌دار با طراحی مناسب برای کنترل و اتصال مطمئن
- ♦ تقویت محل اتصال شفت و هاب برای افزایش دوام و پایداری هنگام کار
- ♦ نوک انتهایی نرم برای کاهش احتمال آسیب به دیواره عروق
- ♦ امکان ارائه در شکل‌ها و مشخصات متناسب با نیازهای مختلف بالینی
- ♦ شکل انتهایی متناسب با رگ هدف، با حافظه شکلی مطلوب در دمای بدن
- ♦ طراحی تکیه‌گاه مناسب برای حفظ پایداری کتر هنگام تزریق ماده حاجب

شیت رادیال

Radial Snap Sheath Introducer

شیت رادیال طبیب مجموعه ای برای ایجاد دسترسی به شریان رادیال و تسهیل ورود سایر تجهیزات برای اعمال آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است.

کاربرد

شیت طبیب مسیری برای ورود تجهیزات به شریان بیمار ایجاد می کند و همزمان مانع خونریزی می شود. طراحی برش و دیواره سوزن، هندسه نوک دایلاتور و شیت، کیفیت شیر هموستاز و ... کیفیت محصول را به نمایش می گذارد.

مشخصات اصلی

رادیال	مسیر
6F (سایر سایزها به زودی تولید می شود)	سایز
۷ و ۱۱ سانتی متر	طول

ویژگی های کلیدی

- ◆ دیواره نازک، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تاخوردگی برای ورود و هدایت روان تجهیزات
- ◆ دریچه هموستاز با طراحی مناسب برای جلوگیری از خونریزی و ورود هوا
- ◆ دایلاتور با شکل دهی دقیق نوک برای ورود ساده تر به بافت پوست و شریان
- ◆ اتصال مطمئن شیت و دایلاتور با امکان جداسازی آسان هنگام استفاده
- ◆ لوله جانبی و شیر سه راهی برای شست شو و تخلیه آسان
- ◆ حلقه بخیه چرخان برای تثبیت مناسب شیت در محل
- ◆ تقویت محل اتصال شیت و هاب برای افزایش پایداری هنگام کار
- ◆ سوزن با نوک کوتاه و پوشش روان کننده برای ورود دقیق تر و آسان تر به رگ
- ◆ کدگذاری رنگی هاب برای تشخیص سریع تر سایز
- ◆ امکان ارائه محصول متناسب با نیازهای مختلف بالینی



شیت فمورال

Femoral Snap Sheath Introducer

شیت فمورال طبیب مجموعه‌ای برای ایجاد دسترسی به شریان فمور و تسهیل ورود سایر تجهیزات برای اعمال آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است.

کاربرد

شیت طبیب مسیری برای ورود تجهیزات به شریان بیمار ایجاد می‌کند و همزمان مانع خون‌ریزی می‌شود. طراحی برش و دیواره سوزن، هندسه نوک دیلاتور و شیت، کیفیت شیر هموستاز و ... کیفیت محصول را به نمایش می‌گذارد.

مشخصات اصلی

فمورال	مسیر
6F (سایر سایزها به زودی تولید می‌شود)	سایز
۱۱ و ۲۳ سانتی‌متر	طول

ویژگی‌های کلیدی

- ◆ دیواره نازک، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تاخوردگی برای ورود و هدایت روان تجهیزات
- ◆ دیلاتور با نوک تدریجی برای ورود روان‌تر به عروق و کاهش مقاومت هنگام عبور
- ◆ دریچه هموستاز برای جلوگیری از خونریزی و ورود هوا
- ◆ قابلیت مشاهده مناسب شیت هنگام تصویربرداری
- ◆ سوزن با نوک کوتاه و پوشش روان‌کننده برای ورود دقیق‌تر و آسان‌تر به رگ
- ◆ لوله جانبی و شیر سه راهی برای شستشو و تخلیه آسان
- ◆ تقویت محل اتصال شیت و هاب برای افزایش پایداری هنگام کار
- ◆ حلقه بخیه چرخان برای تثبیت مناسب شیت در محل
- ◆ اتصال مطمئن شیت و دیلاتور با امکان جداسازی آسان
- ◆ کدگذاری رنگی هاب برای تشخیص سریع‌تر سایز
- ◆ امکان ارائه محصول متناسب با نیازهای مختلف بالینی



گایدوایر PTFE

PTFE Guidewire

گایدوایر PTFE طبیب برای هدایت کنترها در فرایند آنژیوگرافی عروق قلبی و محیطی طراحی شده تا به عنوان مسیری پایدار با حمایت (Support) بالا به انتقال تجهیزات کمک کند.

کاربرد

برای هدایت و جایگذاری کنترها در آنژیوگرافی تشخیصی عروق کرونر و عروق محیطی

مشخصات اصلی

نوک	J1.5 و J3.0
قطر	۰/۰۳۵ اینچ
طول	۱۵۰ ، ۱۸۰ ، ۲۰۰ و ۲۶۰ سانتی متر

ویژگی‌های کلیدی

- ◆ هسته فولادی با استحکام مناسب برای ایجاد حمایت مؤثر هنگام هدایت و تعویض کنتر
- ◆ انتقال مؤثر گشتاور از ابتدای سیم تا نوک برای کنترل مناسب مسیر
- ◆ مقاومت مناسب در برابر تاخوردگی و تغییر شکل هنگام مانور
- ◆ بدنه با استحکام مناسب برای پشتیبانی از پیشروی و تعویض تجهیزات
- ◆ پوشش یکنواخت با هدف کاهش اصطکاک و حرکت روان تر تجهیزات
- ◆ سطح با چسبندگی کمتر برای کاهش احتمال تشکیل لخته
- ◆ نوک نرم و قابل مشاهده هنگام تصویربرداری برای هدایت دقیق تر در مسیر عروقی
- ◆ قابلیت ارائه نوک خمیده در اندازه‌های مختلف متناسب با نیازهای بالینی



گایدوایر هیدروفیلیک

Hydrophilic Guidewire

گایدوایر هیدروفیلیک طبیب با توجه به ساختار بسیار منعطف و پوشش ویژه برای کاهش اصطکاک، برای تسهیل هدایت و جای گذاری کنترها در فرایند آنژیوگرافی طراحی شده است.

کاربرد

هسته نایتینول و پوشش سطح این گایدوایر ترکیبی از انعطاف پذیری و لغزندگی سطح ایجاد می کند که به عبور کنتر از پیچ و خم های دشوار و سخت گذر شریان بیمار کمک می کند.

مشخصات اصلی

نوک	زاویه دار
قطر	۰/۰۳۵ اینچ
طول	۱۵۰ ، ۱۸۰ و ۲۶۰ سانتی متر

ویژگی های کلیدی

- هسته نایتینول یکپارچه با انعطاف پذیری بالا، انتقال مناسب گشتاور و مقاومت در برابر تاختوردگی
- نوک نرم و شکل پذیر با قابلیت مشاهده مناسب هنگام تصویربرداری
- پوشش هیدروفیلیک یکنواخت برای کاهش اصطکاک و عبور روان تر در مسیرهای عروقی پیچیده
- روکش پلیمری حاوی تنگستن برای افزایش دوام و قابلیت مشاهده در طول سیم
- انتقال دقیق حرکت چرخشی از ابتدای سیم تا نوک برای هدایت کنترل شده
- ساختار مقاوم در برابر خم شدگی و تغییر شکل هنگام مانور
- سطح با چسبندگی کمتر برای کاهش احتمال تجمع پروتئین و تشکیل لخته
- بدنه با استحکام مناسب برای پشتیبانی بهتر هنگام پیشروی و تعویض تجهیزات

گایدوایر PTCA

PTCA Guidewire

گایدوایر PTCA طیب برای عبور از محل گرفتگی عروق و کمک به استقرار بالن و جای گذاری استنت در فرایند آنژیوپلاستی به کار می رود.

کاربرد

جنس و طراحی هسته در بخش دیستال، در کنار انعطاف پذیری و نیروی نفوذ بهینه نوک، به پزشک کمک می کند تا مسیر ورود به محل گرفتگی رگ ایجاد کند و فرایند آنژیوپلاستی را انجام دهد.

مشخصات اصلی

نوک	صاف و زاویه دار
قطر	۰/۰۱۴ اینچ
طول	۱۹۰ سانتی متر

ویژگی های کلیدی

- هسته استیل با انتقال مناسب گشتاور و قابلیت پیشروی مطلوب برای هدایت کنترل شده
- طراحی دیستال با انعطاف پذیری مناسب برای عبور از مسیر ضایعه کرونری
- نوک انعطاف پذیر و قابل مشاهده هنگام تصویربرداری برای هدایت دقیق تر در عروق کرونر
- تعادل مناسب بین نرمی و استحکام نوک برای هدایت کنترل شده
- پوشش بدنه با اصطکاک کم برای حرکت روان تر گایدوایر و تجهیزات
- پوشش هیدروفلیک در بخش دیستال برای تسهیل عبور از مسیرهای پیچیده
- انتقال دقیق حرکت چرخشی از ابتدای سیم تا نوک برای کنترل بهتر مسیر
- مقاومت مناسب در برابر خم شدگی و تغییر شکل هنگام مانور
- سطح با چسبندگی کمتر برای کاهش احتمال تشکیل لخته
- بدنه با استحکام مناسب برای پشتیبانی از پیشروی بالون و سایر تجهیزات مداخله ای



شریان بند دو بالونه

Tabeeb Radial Artery Compression Device

شریان بند دو بالونه طیب محصلی برای کنترل خون ریزی محل ورود شیت به شریان رادیال پس از پایان عمل آنژیوگرافی است.

کاربرد

شریان بند برای اعمال فشار پنیوماتیکی کنترل شده بر محل ایجاد سوراخ روی شریان رادیال و پایش چشمی وضعیت هموستاز تا زمانی که خون ریزی متوقف شود، به کار می رود.

مشخصات اصلی

طول بند	۲۴/۵ ، ۲۷ و ۲۹ سانتی متر
ساختار	دو بالونه
کاربرد	هموستاز رادیال

ویژگی های کلیدی

- طراحی دو بالونه برای اعمال فشار یکنواخت در محل ورود شیت
- پنجره شفاف و بزرگ برای مشاهده و کنترل مستقیم هموستاز
- نشانه واضح برای قرارگیری دقیق روی محل خون ریزی
- ساختار نرم و سازگار با مچ دست برای افزایش راحتی بیمار
- بند قابل تنظیم برای تثبیت مناسب در طول هموستاز
- اتصال ایمن برای جلوگیری از نشت ناخواسته هوا
- سرنگ مخصوص هوا با مکانیزم قفل برای تنظیم و حفظ دقیق فشار



شریان‌بند رادیال مدل دیبا

DIBA Radial Artery Compression Device

کارکردی مشابه شریان‌بند دوبالونه برای کنترل و توقف خون‌ریزی پس از آنژیوگرافی دارد.

کاربرد

این محصول برای اعمال فشار پنوماتیکی کنترل شده بر محل ایجاد سوراخ روی شریان رادیال و پایش چشمی وضعیت هموستاز تا زمانی که خون‌ریزی متوقف شود، به کار می‌رود. طراحی دقیق مهندسی، سبب کارکرد مطمئن محصول در عین زیبایی ظاهری مدل دیبا شده است.

مشخصات اصلی

طول‌بند	۲۴/۵ ، ۲۷ و ۲۹ سانتی‌متر
ساختار	تک بالونه
کاربرد	هموستاز رادیال

ویژگی‌های کلیدی

- طراحی تک بالونه برای اعمال فشار یکنواخت در محل ورود شیت
- پنجره شفاف و بزرگ برای مشاهده و کنترل مستقیم هموستاز
- نشانگر واضح برای قرارگیری دقیق روی محل خون‌ریزی
- ساختار نرم و سازگار با مچ دست برای افزایش راحتی بیمار
- بند قابل تنظیم برای تثبیت مناسب در طول هموستاز
- اتصال ایمن برای جلوگیری از نشت ناخواسته هوا
- سرنگ مخصوص هوا با مکانیزم قفل برای تنظیم و حفظ دقیق فشار



اینفلتور

Balloon Inflation Device



اینفلتور طبیب دستگاهی با ساختار کاربرپسند برای باز و بسته کردن کنترل شده بالون PTCA در فرایند آنژیوپلاستی می باشد.

کاربرد

به کمک طراحی دقیق و کیفیت بالای ساخت محصول، اینفلتور طبیب به پزشک امکان می دهد تا سرم را با فشار مورد نظر وارد بالشکت بالون نماید و از این طریق محل گرفتگی رگ را باز یا استنت را تعبیه کند. سهولت استفاده، دقت بالا، تکرار پذیری و عدم افت فشار، از ویژگی های مورد انتظار پزشک است که در محصول طبیب به خوبی رعایت شده است.

مشخصات اصلی

حجم سرنگ	۲۰ میلی متر
فشار	۳۰ و ۴۰ اتمسفر
فرم	نیمه تفنگی

ویژگی های کلیدی

- ایجاد و حفظ فشار پایدار برای باز کردن و تخلیه کنترل شده بالون
- طراحی ارگونومیک برای کاربری آسان
- فشارسنج خوانا برای مشاهده و کنترل دقیق فشار حین فرایند
- مکانیزم رهاسازی سریع برای افزایش و کاهش سریع فشار
- کنترل دقیق حرکت پیستون برای تنظیم تدریجی فشار
- ظرفیت مناسب برای استفاده با انواع بالون های آنژیوپلاستی
- ساختار مستحکم و مقاوم برای عملکرد پایدار در حین استفاده

وای کانکتور

Y-Connector Kit

وای کانکتور طیبیب برای ایجاد امکان تزریق (دارو، ماده حاجب، سرم) همزمان با ورود، هدایت و تعویض تجهیزات آنژیوپلاستی به کار می‌رود.

کاربرد

نقش اصلی وای کانکتور، کنترل خون‌ریزی هنگام عبور تجهیزات از کتتر راهنما در فرایند آنژیوپلاستی و نیز امکان تثبیت موقعیت بالون یا گایدوایر است. همزمان پزشک می‌تواند از ورودی جانبی دارو، سرم یا ماده حاجب تزریق کند.

مشخصات اصلی

طراحی	Push-Pull
رابط	60Cm
اتصال	Rotating Luer Lock

ویژگی‌های کلیدی

- ◆ قطر داخلی مناسب برای عبور و جابه‌جایی روان تجهیزات مداخله‌ای
- ◆ دریچه هموستاز برای کنترل خون‌ریزی هنگام ورود و تعویض تجهیزات
- ◆ مکانیزم قفل برای کاهش نشت خون و حفظ هموستاز
- ◆ امکان باز و بسته کردن دریچه با یک دست
- ◆ اتصال چرخان برای کاهش پیچ‌خوردگی و افزایش آزادی حرکت تجهیزات
- ◆ سازگار با اتصال کتترها، گایدوایرها و تجهیزات مداخله‌ای



سوزن آنژیوگرافی

Angiographic Needle

سوزن آنژیوگرافی طبیب برای ایجاد مسیر دسترسی اولیه به شریان در اعمال آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی طراحی شده است.

کاربرد

برای ورود اولیه به شریان و عبور گایدوایر به منظور ایجاد مسیر لازم برای شیت، کنتور و سایر تجهیزات





مشخصات اصلی

کیج	۱۸ و ۲۱ و ۲۲
جنس بدنه	استنلس استیل
کاربرد	رادیال/فمورال

ویژگی‌های کلیدی

- مناسب برای دسترسی شریانی از مسیر رادیال و فمورال
- نوک تیز و مورب برای پانکچر دقیق و ورود روان‌تر به رگ
- ساخته شده از فولاد ضدزنگ پزشکی با استحکام مناسب
- طراحی داخلی مناسب برای عبور روان گایدوایر
- کمک به ایجاد مسیر دسترسی پایدار برای ورود تجهیزات مداخله‌ای
- ساختار مقاوم برای حفظ عملکرد و کنترل مناسب هنگام ورود سوزن به رگ



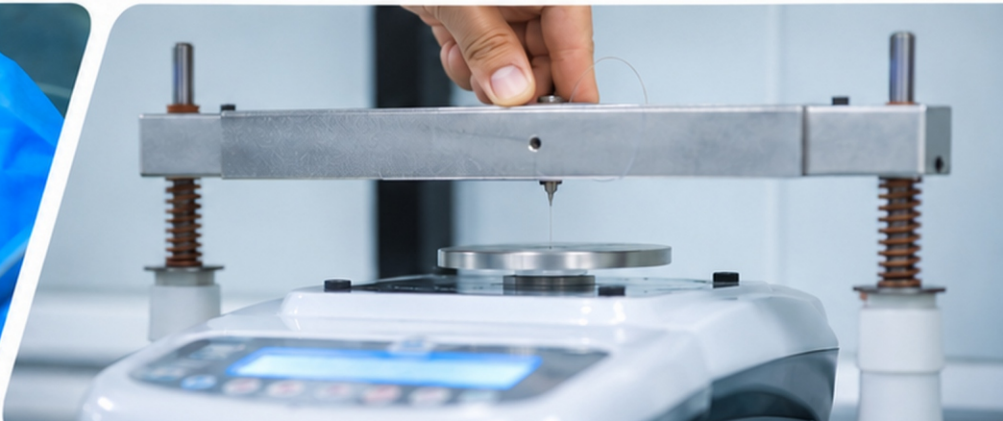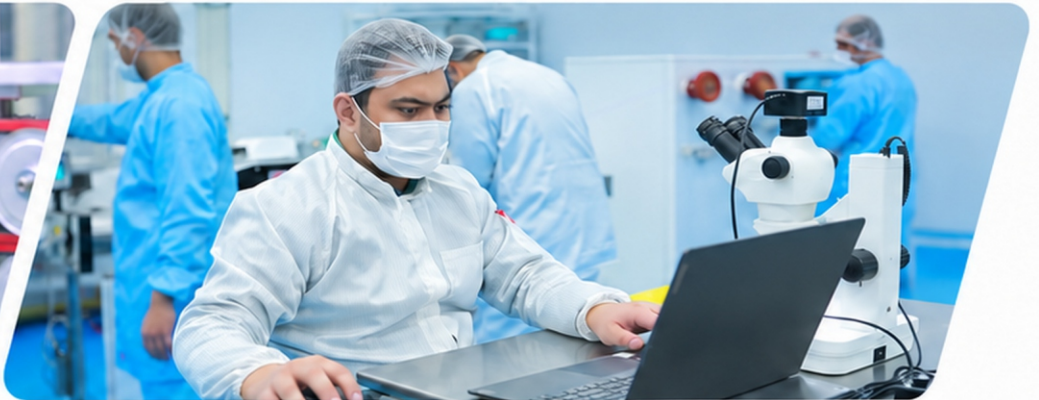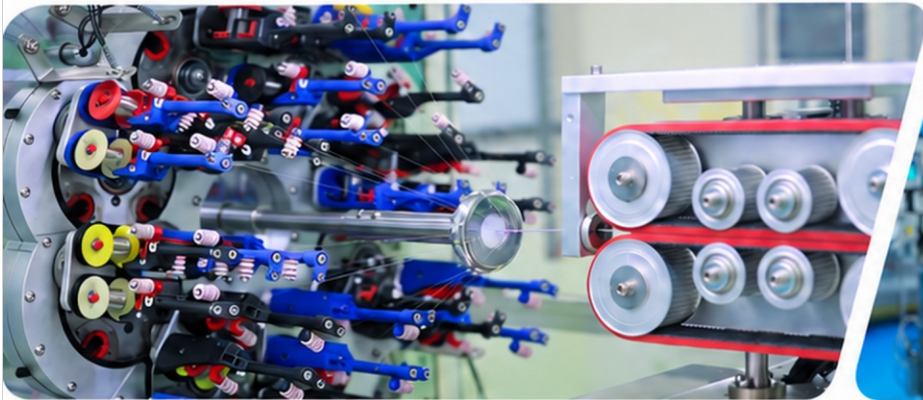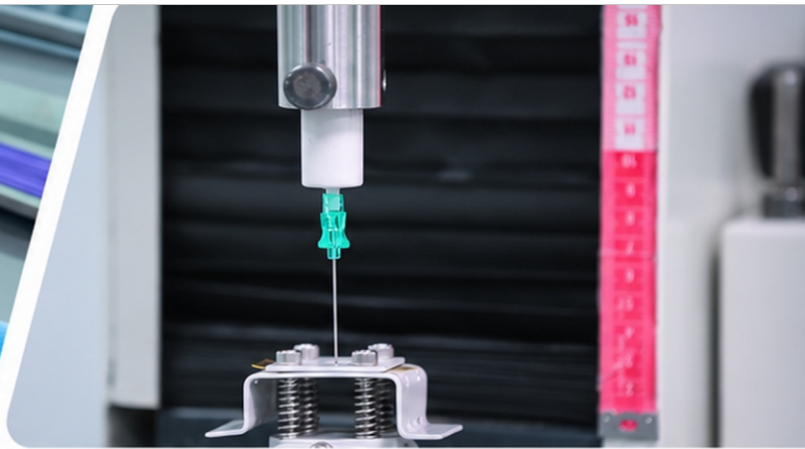

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه نهم، پلاک ۷، طبقه اول
کارخانه: کاشان، فاز ۲ شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان کارآفرینان ۳
تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۰۳۰۱۲-۱۹ داخلی ۸۲۰ (تماس با کارخانه)، داخلی ۳۱۳ (تماس با دفتر مرکزی)

www.tabeebvascular.com

Info@tabeebvascular.com



طبییب درمان پژوهش قلب (سهامی خاص)